


## Montageanleitung Ergo - / Tetra Gripp Greifringe Art.-Nr.: 182027 / 185336 und 182026 / 185334

Schritt 1: Bereifung abnehmen, original Greifringe demontieren

Schritt 2: Durch die 6 Schlitz der originalen Greifring - Halterungen bohren (Bohrer Ø 5.5mm)

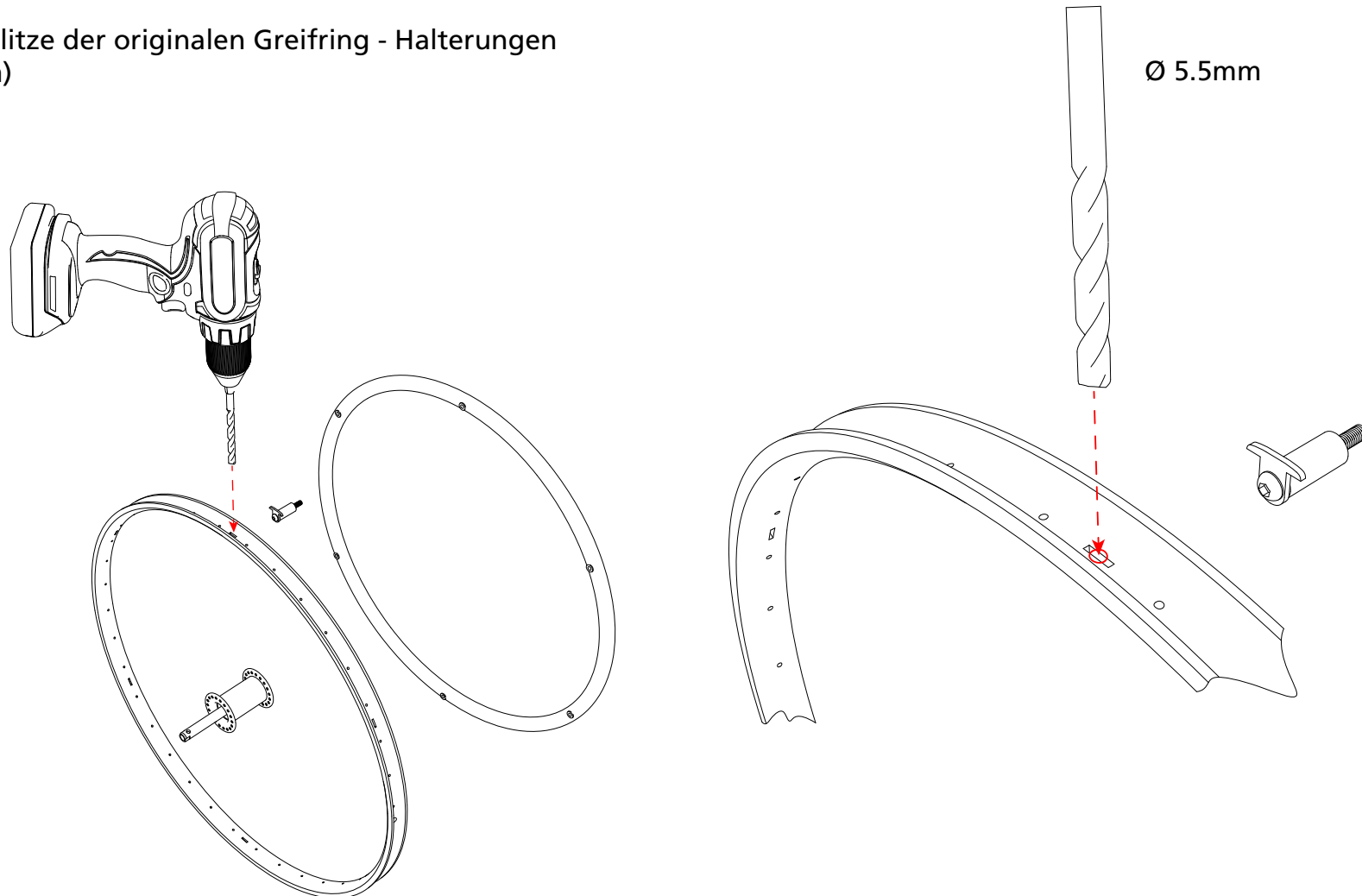

Schritt 3: Ergo - Tetra Gripp Greifringe durch die gebohrten Löcher verschrauben (Schraubenkopf nach „innen“)

Schritt 4: Felgenband einlegen, Bereifung wieder montieren

Die Montage von Ergo - und Tetra Gripp Greifringen ist nur möglich in Kombination mit Luftbereifung

